

Mat Sensor Select

マットセンサー セレクト

職員や外来者が踏んでも反応しません！

対象者だけに反応するマットセンサー

スイッチの入れ忘れがありません

対象者がマットを跨ぐことはありません

マットセンサーにつまづくことはありません

ベッドサイド



対象者がマットを踏むとナースコールで報知

病棟出口・部屋出口・玄関等



対象者がマットを踏むと無線で報知



株式会社 **メディカルプロジェクト**

Mat Sensor Select

スリッパ等の裏に専用テープを貼った対象者がマットセンサーを踏むと報知します

■ 電源の入れ忘れがありません

マットセンサーセレクトは職員や外来者が踏んでも反応しませんのでスイッチを切る必要がありません。

■ 対象者がマットセンサーを跨ぐことがありません

従来のマットセンサーを使用している場合、職員が跨ぐため対象者も同じ行動をして跨ぎます。マットセンサーセレクトは職員が踏んでも反応しないため跨ぐ必要がありません。

■ マットセンサーにつまずくことがありません

マットセンサーセレクトは厚さ2mmで床に密着しますのでつまずきがほとんどありません。

■ 高耐久の専用テープをスリッパ等に少量貼るだけの簡単・低コスト

■ 出口(玄関や病棟出口等)やベッドサイドで使用できます

■ 用途に合わせて無線タイプかナースコールタイプで使用できます

■ 素足で踏んでも報知します(モード切替で可能)

セレクト 無線タイプ

出口等で使用



専用テープを貼ったスリッパ等でマットを踏むと無線で無線受信機に報知します。対象以外の方は踏んでも報知しません。離院・離棟等の対策になります。

■ マットセンサー セレクト(無線タイプ) M1100


病棟出口、玄関等タイプ

- ・マットサイズ 120cm × 60cm
- ・主な機能 中断:30秒、テープのみ反応／裸足反応 切り替え
アラーム音報知可能、感度調整機能、無線で報知



無線受信機

(100mタイプ 8チャンネル)

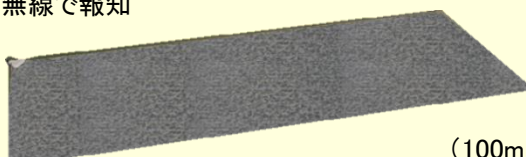


Mat Sensor Select

セレクト ナースコールタイプ

ベッドサイドで使用




専用テープを貼ったスリッパ等でマットを踏むとナースコールで報知します。対象以外の方は踏んでも報知しません。電源の ON/OFF の必要がないため電源入れ忘れ防止になります。
素足でも報知が可能です(モード切替で)

	セレクト スタンダード (ナースコールタイプ) M1300	セレクト (ナースコールタイプ) M1000	セレクト (ワイヤレスナースコールタイプ) M1200
マットサイズ	90cm × 60cm	120cm × 60cm	120cm × 60cm
感度	テープのみ反応／テープ・裸足反応 切り替えスイッチ	テープのみ反応／テープ・裸足反応 切り替えスイッチ	テープのみ反応／テープ・裸足反応 切り替えスイッチ(感度3段階)
中断機能	○	○	×
アラーム音 報知	×	コントロール装置からアラーム (切替可能)	×
ワイヤレス	×	×	マットから1m 配線、ナースコールまでワイヤレス
報知方式	ナースコールワンショット呼出し	ワンショット呼出し／連続呼出し (切替可能)	ナースコールワンショット呼出し
			



車椅子の場合は専用テープを
タイヤに貼ります

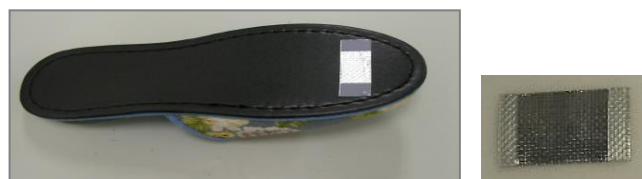

専用テープをスリッパの裏に貼る


オプション品



専用靴下(マットに反応する靴下)



無線タイプ用携帯受信機(距離 80m)

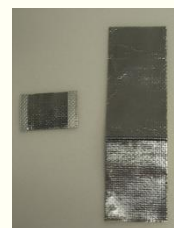

専用テープ

カタログ番号	品名	価格
M1300	マットセンサー セレクト スタンダード(ナースコールタイプ)	¥59,000
ベッドサイドにマットを置き、ナースコールで報知するタイプ		
■コントロール装置 本体サイズ: 幅 50×高さ 90×厚さ 25mm 設置場所:室内 電源:AC電源アダプタ ナースコールケーブル: 3m 中断ボタン:15 秒中断 ■マットセンサー サイズ: 90cm×60cm、厚さ 2mm、ケーブル 3m、材質:塩化ビニール、ステンレス線 <付属品> コントロール装置、AC 電源アダプタ(DC12V)、マットセンサー、ナースコールアダプタ、専用テープ		
M1000	マットセンサー セレクト (ナースコールタイプ)	¥90,000
ベッドサイドにマットを置き、ナースコールで報知するタイプ		
■コントロール装置 本体サイズ: 幅 70×高さ 115×厚さ 23mm 設置場所:室内 電源:AC電源アダプタ ナースコールケーブル: 3m アラーム:ON/OFF 切替 中断ボタン:30 秒中断 ■マットセンサー サイズ: 120cm×60cm 厚さ 2mm , ケーブル 4m、材質:塩化ビニール、ステンレス線 <付属品> コントロール装置、AC 電源アダプタ(DC12V)、マットセンサー、ナースコールアダプタ、専用テープ		
M1200	マットセンサー セレクト (ワイヤレスナースコールタイプ)	¥140,000
ワイヤレスでナースコールを報知するタイプ		
■無線発信機 本体サイズ: 幅 70×高さ 70×厚さ 24mm 設置場所:室内 電源:3V CR2 小電力無線発信機 設定:専用テープに反応・感度(低)・感度(中)・感度(高) 、電池交換:受信器で表示 ■無線受信機(ナースコール接続) 小電力無線受信機(ECE5101M)、電波到達 40m ■マットセンサー サイズ: 120cm×60cm 厚さ 2mm 材質:塩化ビニール、ステンレス線、ケーブル 1m <付属品> 無線発信機、無線受信機(ナースコール接続用)、ナースコールアダプタ、マットセンサー、専用テープ		
M1100	マットセンサー セレクト (無線タイプ)	¥114,000
出口等にマットを置き、無線で報知するタイプ		
■コントロール装置 本体サイズ: 幅 70×高さ 115×厚さ 23mm 設置場所:室内 電源:AC電源アダプタ 小電力無線発信機内蔵 ■無線受信機 小電力無線受信機 REV500 電波到達 100m ■マットセンサー サイズ: 120cm×60cm 厚さ 2mm 材質:塩化ビニール、ステンレス線 <付属品> コントロール装置、AC 電源アダプタ(DC12V)、小電力無線受信機(8 チャンネル)、マットセンサー、専用テープ		
<共通仕様>		
◆設置場所:室内 ◆洗浄方法: 消毒材(事前にテストしてください) ◆ナースコール形状によって別途費用がかかることがあります。◆マットセンサーは水分や皮膚が触れることでも感知・報知するモード と 報知しないモードに切り替ええます。(皮膚が乾燥している場合は感知しないこともあります。事前テストしてください。)		
オプション品		
M1300MAT	マットセンサー スタンダードタイプ サイズ 90cm×60cm	¥30,000
M1000MAT	マットセンサー標準タイプ サイズ 120cm×60cm	¥50,000
M1200MAT	マットセンサー ワイヤレスナースコールタイプ サイズ 120cm×60cm	¥50,000
M1000LMAT	マットセンサー L サイズ 240cm×60cm	¥65,000
M1000PTB	ベッドサイド用専用シール 50mm×30mm 100 枚入り	¥3,000
M1000PT	廊下・出口用専用シール 50mm×150mm 10 枚入り	¥2,000
規格品以外のマットは特注として作成します。(幅 90cm・長さ 300cm 以内になります)		

*消費税が別途かかります

*マットセンサーは消耗品であり、保証期間を過ぎた後の故障は新品交換が必要な場合があります

実用新案登録

 株式会社メディカルプロジェクト

本社: 〒420-0026 静岡市葵区大鋸町 1 番地の 12

TEL 054-252-1141 FAX 054-254-0574

札幌営業所 TEL 011-233-0339

2014-9